

---

# NOTICE SIMPLIFIEE D'UTILISATION DE VOTRE GMAO EN LIGNE

---



<b>CONNEXION A VOTRE GMAO EN LIGNE</b> .....	2
<b>UTILISATION DE VOTRE GMAO EN LIGNE</b> .....	5
<b>1 - « Je suis à la recherche d'un équipement. Comment le retrouver et consulter les détails qui s'y rapportent ? »</b> .....	5
<i>ANNEXE 1 : détails des critères du filtre d'équipements</i> .....	9
<b>2 - « Je suis à la recherche d'une intervention. Comment la retrouver et consulter les détails qui s'y rapportent ? »</b> .....	10
<i>ANNEXE 2 : détails des critères du filtre d'interventions</i> .....	14
<b>3 - « Je souhaite faire une demande d'intervention à partir de la GMAO en ligne. Comment dois-je procéder ? »</b> .....	15

Ce document est une notice **simplifiée** d'utilisation de votre GMAO OPTIM en ligne. Elle permet de consulter toutes les informations relatives à votre parc de matériel médical.

## CONNEXION A VOTRE GMAO EN LIGNE

**ETAPE 1** - Accédez au site Internet de BIOMESNIL MEDICAL à l'adresse suivante :

<http://www.biomesnil.com>

**ETAPE 2** - Cliquez sur le lien « **Accès GMAO** » ou le logo « **OPTIM** ».

Accueil Liens Aide Plan du site

Ecrivez-nous Accès GMAO OCCASIONS DU MOIS

BIOMESNIL médical

SERVICES CATALOGUES LEGISLATION IMPLANTATIONS NEWS

Bienvenue sur notre site

NOTRE SOCIETE

BIOMESNIL MEDICAL est spécialisée dans la maintenance biomédicale et la gestion de dispositifs médicaux et vous propose des solutions adaptées à vos besoins et vos exigences.

PLUS D'INFOS

VOTRE ESPACE CLIENT

Optim

Dernière mise à jour du site:  
le 13 février 2009

Copyright © 2006, BIOMESNIL MEDICAL. Tous droits réservés .  
[Informations légales](#)

**ETAPE 3** - Cliquez sur le logo « **OPTIM CEM** »



Pour accéder à vos données,

- Cliquez sur  (The logo is circled in red with a red arrow pointing to it from the right.)

Entrez votre **Login** et votre **Mot de passe**  
(Fourni par votre service commercial et personnalisable)

Besoin d'assistance technique :

- Cliquez sur 

En cliquant sur ce lien, nous allons pouvoir vous assister dans l'utilisation de votre GMAO en ligne

**ETAPE 4** - Tapez votre « **Login** » et votre « **Mot de passe** », puis cliquez sur « **Validation** »

**Identification de l'utilisateur :**

Login de l'utilisateur :

Mot de passe :

→ [Mot de passe oublié](#) Validation

La page suivante s'affiche alors :

The screenshot shows the Optim CEM 5.0.2 web interface. The header includes the version number 'Optim CEM 5.0.2' on the left and the 'OptimCEM Clinical Equipment Management' logo on the right, with a 'Déconnexion' link. A left-hand navigation menu lists various categories such as 'Accueil', 'Equipement', 'Demande d'intervention', 'Réponse demande d'intervention', 'Prêt', 'Prêt en cours', 'Prêt en fin d'échéance', 'Demande de prêts', and 'Intervention'. The main content area displays a 'Bienvenue' message dated 24/12/2008, followed by a 'Notice' dated 24/12/2008, stating that a simplified notice will be sent at the beginning of 2009.

A partir de ce moment, vous pouvez commencer à utiliser la GMAO en ligne.

## UTILISATION DE VOTRE GMAO EN LIGNE


**« Je suis à la recherche d'un équipement. Comment le retrouver et consulter les détails qui s'y rapportent ? »**

Commencez par cliquer sur « **Filtre** » dans la catégorie « **Equipement** »

Les différents champs qui s'affichent vont vous permettre de retrouver un(des) équipement(s) précis selon un(des) critère(s) en rapport avec cet(ces) équipement(s).

Saisissez alors dans les cases correspondantes les éléments que vous connaissez. Plus vous saisissez de critères différents, plus le résultat de votre recherche sera précis.

A titre d'exemple, supposons que vous cherchez à consulter la fiche d'équipement de l'un de vos bistouris électriques de type « ICC 300 ». Remplissez les champs comme sur l'image ci-dessous, puis cliquez sur « **Appliquer** » en bas de l'écran :

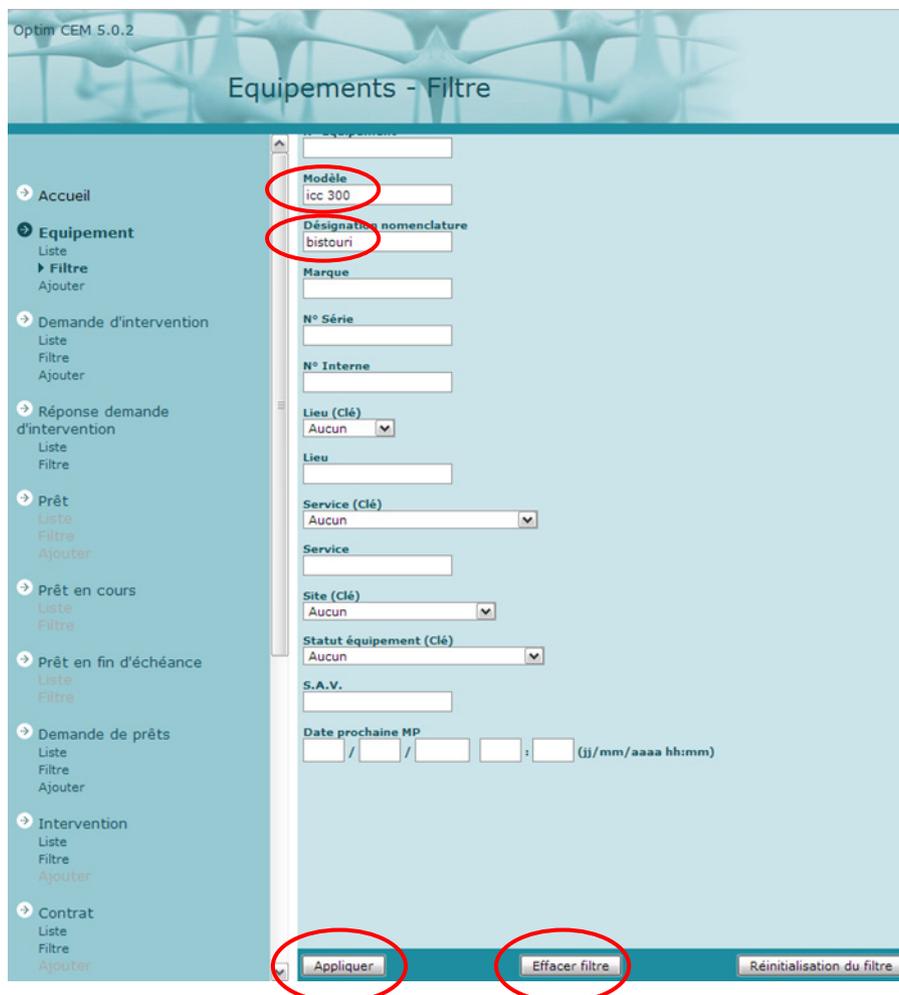

Optim CEM 5.0.2

### Equipements - Filtre

Accueil

**Equipement**

- Liste
- Filtre**
- Ajouter

Demande d'intervention

- Liste
- Filtre
- Ajouter

Réponse demande d'intervention

- Liste
- Filtre

Prêt

- Liste
- Filtre
- Ajouter

Prêt en cours

- Liste
- Filtre

Prêt en fin d'échéance

- Liste
- Filtre

Demande de prêts

- Liste
- Filtre
- Ajouter

Intervention

- Liste
- Filtre
- Ajouter

Contrat

- Liste
- Filtre
- Ajouter

Modèle  
icc 300

Désignation nomenclature  
bistouri

Marque

N° Série

N° Interne

Lieu (Clé)  
Aucun

Lieu

Service (Clé)  
Aucun

Service

Site (Clé)  
Aucun

Statut équipement (Clé)  
Aucun

S.A.V.

Date prochaine MP  
 / / : (jj/mm/aaaa hh:mm)

Appliquer

Effacer filtre

Réinitialisation du filtre

*(Certains critères comme le « N° d'équipement » ou le « N° de série » permettent en général de trouver l'appareil du 1<sup>er</sup> coup, puisque chaque appareil possède un numéro d'équipement et un numéro de série unique...)*

**ATTENTION :** A chaque nouvelle recherche par filtre, veillez à cliquer sur « **Effacer filtre** » avant de remplir les champs de recherche.

Une liste correspondant à votre recherche s'affiche alors.

Optim CEM 5.0.2

**OptimCEM**  
Clinical Equipment Management

Déconnexion

### Equipements - Liste

Nombre d'enregistrements : 7

N° Equipement	N° Interne	Désignation nomenclature	Marque	Modèle	N° Série	Statut équipement	S.A.V.	Lieu	Service	Classe des DH
00026986	ROUGE	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	F 1637	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 8	Classe II B
00019683	ROSE	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	A 1232	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 2	Classe II B
00019687	VERT TILLEUL	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	F 1535	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 5	Classe II B
00019686	JAUNE	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	B-1126	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 9	Classe II B
00019681	BLEU CIEL	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	B-1158	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 3	Classe II B
00019685	ORANGE	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	A-1233	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 4	Classe II B
00019680	NOIR	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	ERBE MEDICAL	ICC 300	F-1163	En service	BIOMESNIL MEDICAL	NIVEAU 0	SALLE 7	Classe II B

Aller à la page Page : 1/1

Premier Précédent Suivant Dernier

L'appareil que vous cherchez doit logiquement se trouver dans cette liste. Si c'est le cas, cliquez sur le numéro d'équipement correspondant afin de consulter la fiche complète.

Optim CEM 5.0.2

**OptimCEM**  
Clinical Equipment Management

Déconnexion

### Equipement

Statut : Normal

N° Equipement	00026986
N° Série	F 1637
Statut équipement	En service
Modèle	ICC 300
Nomenclature	36301 BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE
Marque	ERBE MEDICAL
Site	CMC L EUROPE - P.MARLY
Lieu	NIVEAU 0
Service	SALLE 8
Quantité	1
Prix unitaire HT	€ 0
TVA Prix unitaire (%)	19.6
Prix unitaire TTC	€ 0
Total HT	€ 0
Prix total TVA (%)	19.6
Total TTC	€ 0
Date d'achat (jj/mm/aaaa hh:mm)	
Date de mise en service (jj/mm/aaaa hh:mm)	
Commentaires	BISTOURI
Garantie de l'équipement (mois)	12
Garantie de l'intervention (mois)	0
Date de la dernière intervention curative (jj/mm/aaaa hh:mm)	
Intervalle (maintenance interne) entre	
Mois de référence (maintenance interne)	
Intervalle (maintenance externe) entre	
Mois de référence (maintenance externe)	

Page : 1/1

Premier Précédent Suivant Dernier

[Contrats par équipement - Liste](#)

[Interventions par équipement - Liste](#)

[Demande d'intervention par équipement - Liste](#)

Sous le détail de l'équipement, divers liens vous permettent de consulter la liste des contrats qui incluent cet équipement, ou la liste des interventions en rapport avec cet équipement.

Dans ce cas précis, lorsque vous cliquez sur « Contrats par équipements - Liste », voici la fenêtre qui s'affiche :

Optim CEM 5.0.2  
**Equipement**  
 Statut : Normal

OptimCEM  
 Clinical Equipment Management  
 Déconnexion

Retour au Détail Ajouter

### Contrats par équipement - Liste

00026986  
 Nombre d'enregistrements : 2

Code	Type de contrat	Fournisseur	Date de début	Date de fin de contrat prévue	Date réelle de fin	Montant HT	Montant TTC	Budget
2007C7803	Standard option base	BIOMESNIL MEDICAL	23/01/2008	31/07/2008	31/07/2008	100	119.6	
2008C7803	Standard option base	BIOMESNIL MEDICAL	01/08/2008	31/07/2009	31/07/2009	100	119.6	

Page : 1/1 Premier Précédent Suivant Dernier

*(Vous pouvez voir que cet appareil est inclus dans deux contrats Biomesnil Médical.)*

Et lorsque vous cliquez sur « Interventions par équipement - Liste », voici la fenêtre qui s'affiche :

Optim CEM 5.0.2  
**Equipement**  
 Statut : Normal

OptimCEM  
 Clinical Equipment Management  
 Déconnexion

Retour au Détail Ajouter

### Interventions par équipement - Liste

00026986  
 Nombre d'enregistrements : 2

N° Intervention	Statut intervention	Type d'intervention	Date de début	Date de fin	S.A.V. intervention	Coût total HT	Coût total TTC	Symptômes	Remèdes
0073533	Terminée	Préventif sous contrat	23/01/2008	23/01/2008	BIOMESNIL MEDICAL	100	119.6	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure.
1782372117	Terminée	Préventif sous contrat	16/02/2009	16/02/2009	BIOMESNIL MEDICAL	0	0	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.

Page : 1/1 Premier Précédent Suivant Dernier

*(Ici, vous voyez que cet appareil a subi deux interventions préventives)*

Vous pouvez également cliquer sur un des numéros d'intervention pour afficher le détail de l'intervention.

Optim CEM 5.0.2  
**Equipement**  
 Statut : Normal

OptimCEM  
 Clinical Equipment Management  
 Déconnexion

Retour à la liste Ajouter Modifier Supprimer

### Intervention

Statut : Normal

N° Intervention	0073533
Equipement	00026986
Type d'intervention	Préventif sous contrat
Statut	Terminée
Lieu	CLINIQUE
Service	SALLE 8
Corps de métier	
Technicien	
Planifiée le (jj/mm/aaaa hh:mm)	23/1/2008
Date de début (jj/mm/aaaa hh:mm)	23/1/2008
Date de fin (jj/mm/aaaa hh:mm)	23/1/2008
Description	
Symptômes	Maintenance préventive annuelle
Remèdes	Révision selon procédure.
Commentaires	RMP
Coût total HT	€ 100
Coût total TTC	€ 119.6
Préventif	01.10.082.01


## ANNEXE 1 : détails des critères du filtre d'équipements

Afin de vous aider dans la recherche des équipements, voici à quoi correspond chaque critère du filtre d'équipements :

NOM DU CHAMP DE RECHERCHE	CORRESPONDANCE / EXPLICATIONS
<b>N° Equipement</b>	Si votre appareil a déjà été réparé ou révisé par Biomesnil Médical, ce champ correspond au code-barre qui a été collé dessus. Vous pouvez saisir tout ou une partie du code-barre.
<b>Modèle</b>	Correspond au modèle de l'appareil ( <i>ex : PILOTE A, ICC 200, OSIRIS, etc...</i> ). Vous pouvez saisir tout ou une partie du modèle.
<b>Désignation nomenclature</b>	Correspond à la catégorie à laquelle appartient votre appareil ( <i>ex : ventilateur, réchauffeur, pousse-seringue, bistouri, etc...</i> ). Vous pouvez saisir tout ou une partie de la désignation.
<b>Marque</b>	Correspond à la marque de l'appareil ( <i>ex : VIAL, LAMIDEY, BAIR HUGGER TAEMA, etc...</i> ). Vous pouvez saisir tout ou une partie de la marque.
<b>N° Série</b>	Correspond au numéro de série de l'appareil. <b>En général, Biomesnil Médical insère des espaces entre les chiffres et les lettres des numéros de série pour une meilleure lisibilité : ceci peut affecter votre recherche.</b> Vous pouvez saisir tout ou une partie du numéro de série.
<b>N° Interne</b>	Correspond au numéro de l'appareil choisi par votre établissement. Ce champ est utilisable si Biomesnil Médical possède cette information et si la base de données a été mise à jour.
<b>Lieu (Clé)</b>	Correspond à la liste des différents lieux de votre établissement renseignés par l'inventaire qui a pu être réalisé. Choisissez le lieu dans la liste.
<b>Lieu</b>	Correspond à la liste des lieux de votre établissement. Vous pouvez saisir tout ou une partie du lieu.
<b>Service (Clé)</b>	Correspond à la liste des différents services de votre établissement renseignés par l'inventaire qui a pu être réalisé. Choisissez le service dans la liste.
<b>Service</b>	Correspond à la liste des services de votre établissement. Vous pouvez saisir tout ou une partie du service.
<b>Site (Clé)</b>	Utile si votre établissement est composé de plusieurs sous-établissements.
<b>Statut Equipement (Clé)</b>	Permet la recherche d'un équipement selon son statut ( <i>ex : En service, en maintenance, hors service, etc...</i> ).
<b>S.A.V.</b>	Permet de trouver un équipement selon l'entreprise qui réalise la maintenance de l'appareil. Saisissez tout ou une partie du nom de l'entreprise.
<b>Date prochaine MP</b>	Permet (si la fiche de l'appareil est correctement à jour) de filtrer un appareil selon une date précise de prochaine maintenance préventive. Ce champ est utile dans le cas d'interventions prévues dans un contrat de maintenance Biomesnil Médical, puisque les dates d'interventions sont planifiées le même jour.

**« Je suis à la recherche d'une intervention. Comment la retrouver et consulter les détails qui s'y rapportent ? »**


Commencez par cliquer sur « **Filtre** » dans la catégorie « **Intervention** »

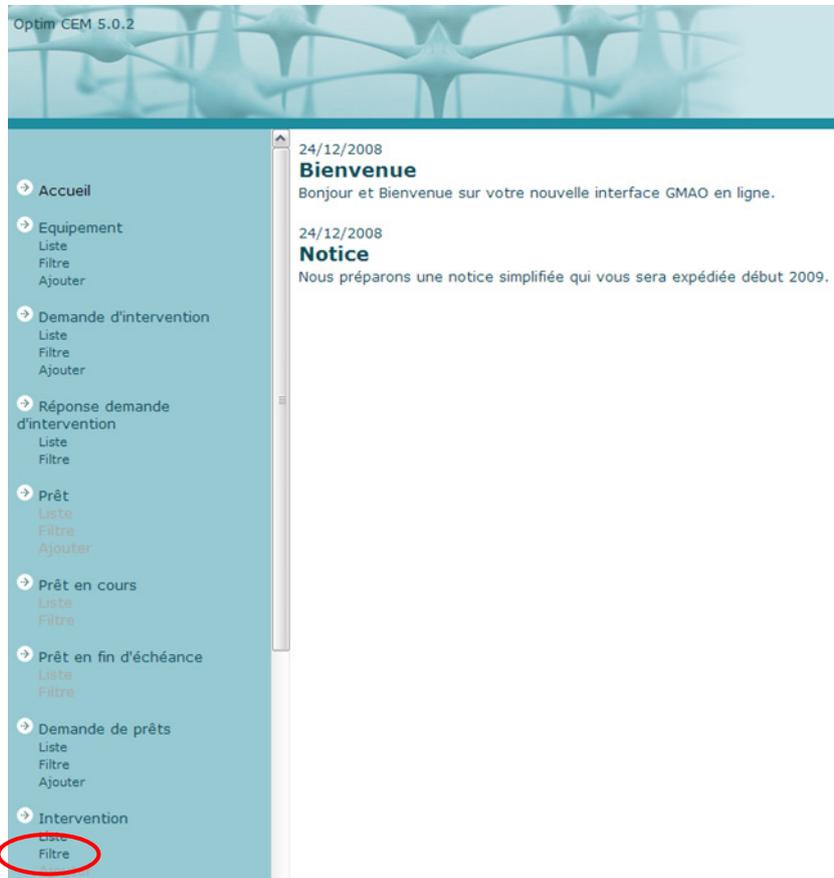

Les différents champs qui s'affichent vont vous permettre de retrouver une(des) intervention(s) précise(s) selon un(des) critère(s) en rapport avec cette(ces) interventions(s).

Saisissez alors dans les cases correspondantes les éléments que vous connaissez. Plus vous saisissez de critères différents, plus le résultat de votre recherche sera précis.

A titre d'exemple, supposons que vous cherchez à consulter les interventions de l'un de vos bistouris électriques de type « ICC 300 ». Remplissez les champs comme sur l'image ci-dessous, puis cliquez sur « **appliquer** » en bas de l'écran :

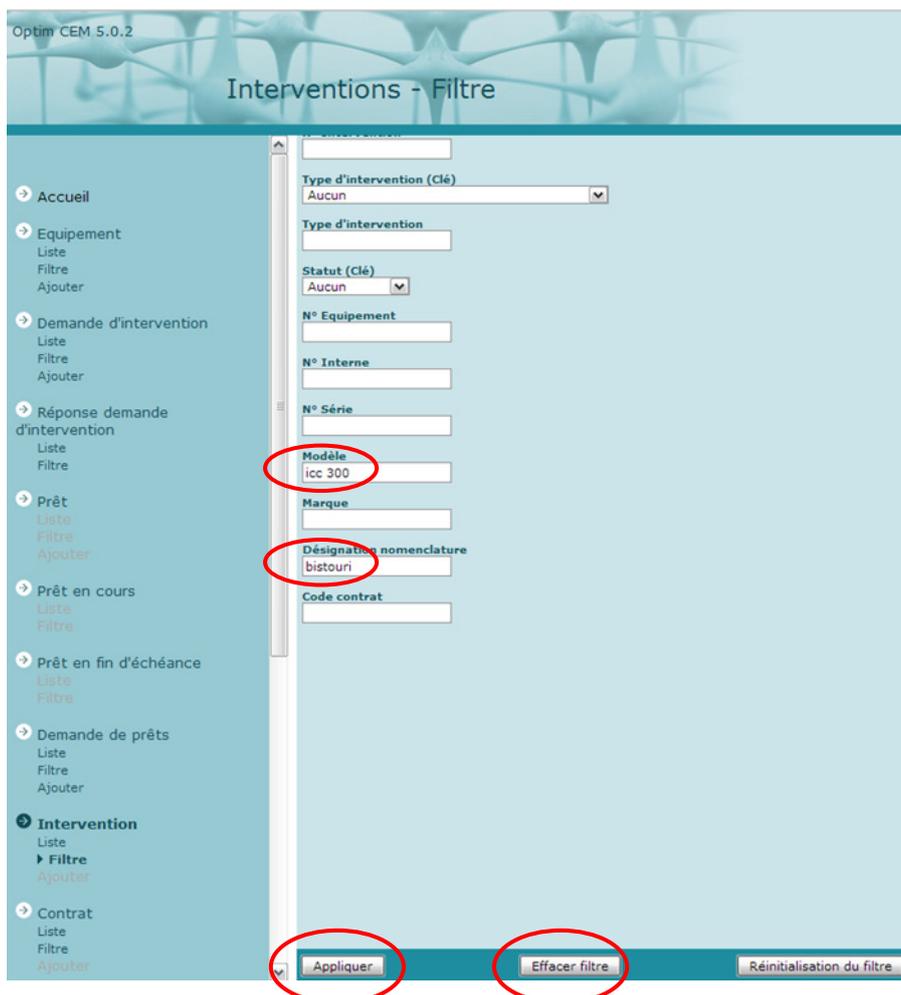

*(Certains critères comme le « N° d'intervention » permettent en général de trouver une intervention du 1<sup>er</sup> coup, puisque chaque intervention possède un numéro unique...)*

**ATTENTION :** A chaque nouvelle recherche par filtre, veuillez à cliquer sur « **Effacer filtre** » avant de remplir les champs de recherche.

Une liste correspondant à votre recherche s'affiche alors.

Optim CEM 5.0.2

**OptimCEM**  
Clinical Equipment Management

→ Déconnexion

### Interventions - Liste

Nombre d'enregistrements : 38

N° Intervention	Type d'intervention	Statut intervention	N° Equipement	N° Série	Modèle	Lieu	Service	Marque	Planifiée le	Date de fin	Symptômes	Remèdes	C
1782372117	Préventif sous contrat	Terminée	00026986	F 1637	ICC 300	NIVEAU 0	SALLE 8	ERBE MEDICAL	27/1/2009	16/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
1782372065	Préventif sous contrat	Terminée	00019683	A 1232	ICC 300	NIVEAU 1	SALLE 11	ERBE MEDICAL	27/1/2009	17/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
1782372064	Préventif sous contrat	Terminée	00019687	F 1535	ICC 300	NIVEAU 0	BLOCS OPERATOIRES	ERBE MEDICAL	27/1/2009	16/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.cordon pédale à remplacer.	2008
1782372007	Préventif sous contrat	Terminée	00019686	B-1126	ICC 300	NIVEAU 0	SALLE 3	ERBE MEDICAL	27/1/2009	17/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
1782372005	Préventif sous contrat	Terminée	00019681	B-1158	ICC 300	NIVEAU 0	BLOC SALLE 1	ERBE MEDICAL	27/1/2009	17/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
1782371971	Préventif sous contrat	Terminée	00019685	A-1233	ICC 300	NIVEAU 0	SALLE 4	ERBE MEDICAL	27/1/2009	16/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
1782371967	Préventif sous contrat	Terminée	00019680	F-1163	ICC 300	NIVEAU 0	SALLE 6	ERBE MEDICAL	27/1/2009	16/2/2009	Maintenance préventive annuelle	Révision selon procédure ok.	2008
											Nettoyage et démontage ,réglage des paramètres		

L'intervention que vous cherchez doit logiquement se trouver dans cette liste. Si c'est le cas, cliquez sur le numéro d'intervention correspondant afin de consulter la fiche complète.

Optim CEM 5.0.2

**OptimCEM**  
Clinical Equipment Management

→ Déconnexion

### Intervention

Statut : Normal

Retour à la liste		Ajouter	Modifier	Supprimer
<b>N° Intervention</b>	1782372117			
<b>Equipement</b>	00026986			
<b>Type d'intervention</b>	Préventif sous contrat			
<b>Statut</b>	Terminée			
<b>Lieu</b>	NIVEAU 0			
<b>Service</b>	SALLE 8			
<b>Corps de métier</b>				
<b>Technicien</b>				
<b>Planifiée le (jj/mm/aaaa hh:mm)</b>	27/1/2009			
<b>Date de début (jj/mm/aaaa hh:mm)</b>	16/2/2009			
<b>Date de fin (jj/mm/aaaa hh:mm)</b>	16/2/2009			
<b>Description</b>				
<b>Symptômes</b>	Maintenance préventive annuelle			
<b>Remèdes</b>	Révision selon procédure ok.			
<b>Commentaires</b>	Edité le 28.01.09 - (cc)			
<b>Coût total HT</b>	€ 0			
<b>Coût total TTC</b>	€ 0			
<b>Préventif</b>	01.10			

Page : 1/0    Premier   Précédent   Suivant   Dernier

## ANNEXE 2 : détails des critères du filtre d'interventions

Afin de vous aider dans la recherche des interventions, voici à quoi correspond chaque critère du filtre d'intervention :


NOM DU CHAMP DE RECHERCHE	CORRESPONDANCE / EXPLICATIONS
<b>N° Intervention</b>	Permet de rechercher une intervention directement à partir de son numéro. (ex : pour les interventions réalisées par Biomesnil Médical, ce numéro se situe en haut à droite du bon d'intervention).
<b>Type d'intervention (Clé)</b>	Correspond à la liste des différents types d'interventions existantes. (ex : préventif sous contrat, curatif dépannage, garantie, etc...)
<b>Type d'intervention</b>	Permet de saisir tout ou une partie d'un type d'intervention existante. (ex : préventif, curatif, etc...)
<b>Statut (Clé)</b>	Permet de choisir un statut d'intervention. (ex : à faire, non réalisé, terminé)
<b>N° Equipement</b>	Si votre appareil a déjà été réparé ou révisé par Biomesnil Médical, ce champ correspond au code-barre qui a été collé dessus. Vous pouvez saisir tout ou une partie du code-barre.
<b>N° Interne</b>	Correspond au numéro de l'appareil choisi par votre établissement. Ce champ est utilisable si Biomesnil Médical possède cette information et si la base de données a été mise à jour.
<b>N° Série</b>	Correspond au numéro de série de l'appareil. En général, Biomesnil Médical insère des espaces entre les chiffres et les lettres des numéros de série pour une meilleure lisibilité : ceci peut affecter votre recherche. Vous pouvez saisir tout ou une partie du numéro de série.
<b>Modèle</b>	Correspond au modèle de l'appareil (ex : PILOTE A, ICC 200, OSIRIS, etc...). Vous pouvez saisir tout ou une partie du modèle.
<b>Marque</b>	Correspond à la marque de l'appareil (ex : VIAL, LAMIDEY, BAIR HUGGER TAEMA, etc...). Vous pouvez saisir tout ou une partie de la marque.
<b>Désignation nomenclature</b>	Correspond à la catégorie à laquelle appartient votre appareil (ex : ventilateur, réchauffeur, pousse-seringue, bistouri, etc...). Vous pouvez saisir tout ou une partie de la désignation.
<b>Code Contrat</b>	Permet de lancer une recherche à partir du code de l'un de vos contrats. (ex : 2008C7803, 2009C1402, etc...)

**« Je souhaite faire une demande d'intervention à partir de la GMAO en ligne. Comment dois-je procéder ? »**

Commencez par cliquer sur « **Ajouter** » dans la catégorie « **Demande d'intervention** »



Vous pourrez alors commencer à remplir votre demande d'intervention.

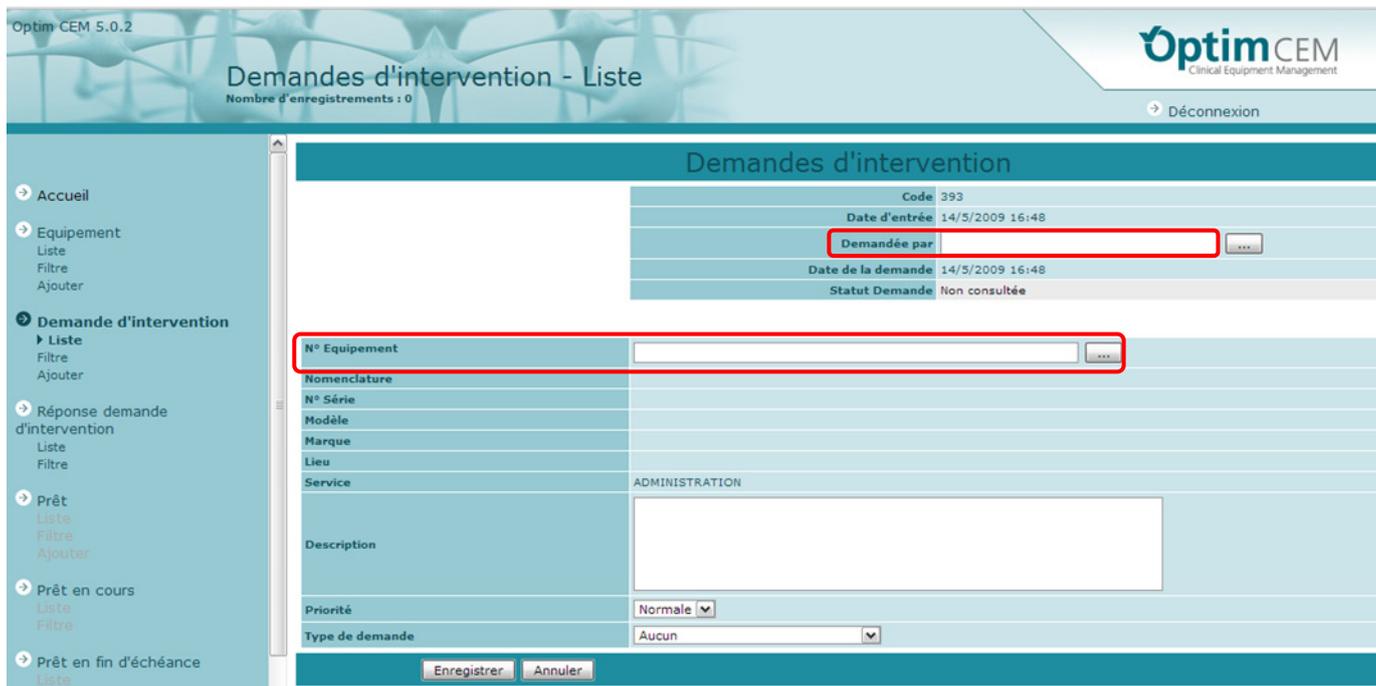

Saisissez votre nom dans le champ « **Demandée par** », puis un critère en rapport avec l'équipement concerné dans le champ « **N° Equipement** ». Vous n'êtes pas obligé de saisir le numéro de votre appareil : si vous ne le connaissez pas, saisissez sa marque, sa désignation, son modèle ou son numéro de série, et cliquez sur le bouton à droite du champ.

La GMAO vous proposera alors une liste d'appareils correspondant à votre demande, et vous n'aurez plus qu'à choisir le bon.

A titre d'exemple, supposons que vous souhaitez faire une demande d'intervention sur l'un de vos bistouris électriques de type « ICC 300 ». Saisissez alors « ICC 300 » dans le champ « N° Equipement ».

Optim CEM 5.0.2

Demandes d'intervention - Liste  
Nombre d'enregistrements : 0

OptimCEM  
Clinical Equipment Management

↳ Déconnexion

**Demandes d'intervention**

Code	393
Date d'entrée	14/5/2009 16:48
Demandée par	Laurent DUPONT
Date de la demande	14/5/2009 16:48
Statut Demande	Non consultée

N° Equipement:

Nomenclature

N° Série

Modèle

Marque

Lieu

Service: ADMINISTRATION

Description:

Priorité: Normale

Type de demande: Aucun

Cliquez alors sur le bouton situé à droite du champ de saisie. La liste de vos « ICC 300 » va alors s'afficher.

Optim CEM 5.0.2

Demandes d'intervention - Liste  
Nombre d'enregistrements : 0

OptimCEM  
Clinical Equipment Management

↳ Déconnexion

**Recherche équipements - Liste**  
Nombre d'enregistrements : 7

N° Equipement	N° de série	Marque	Modèle	Code nomenclature	Désignation nomenclature	Lieu	Service	Code lieu	Statut équipement
00019680	F-1163	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 7	C7803	En service
00019681	B-1158	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 3	C7803	En service
00019683	A 1232	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 2	C7803	En service
00019685	A-1233	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 4	C7803	En service
00019686	B-1126	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 9	C7803	En service
00019687	F 1535	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 5	C7803	En service
00026986	F 1637	ERBE MEDICAL	ICC 300	36301	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE	NIVEAU 0	SALLE 8	C7803	En service

Aller à la page Page : 1 / 1

↳ Premier ◀ Précédent | Suivant ▶ Dernier

Cliquez maintenant sur le numéro d'équipement de l'appareil correspondant à votre recherche : votre écran va afficher votre demande en cours, mais pré-remplie avec les détails de l'équipement.

Optim CEM 5.0.2

Demandaes d'intervention - Liste  
Nombre d'enregistrements : 0

OptimCEM  
Clinical Equipment Management

↳ Déconnexion

Code	393
Date d'entrée	14/5/2009 16:48
Demandée par	Laurent DUPONT
Date de la demande	14/5/2009 16:48
Statut Demande	Non consultée

N° Equipement	00019680
Nomenclature	BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE
N° Série	F-1163
Modèle	ICC 300
Marque	ERBE MEDICAL
Lieu	NIVEAU 0
Service	ADMINISTRATION
Description	Problème de coagulation, défaut électrode active.
Priorité	Haute
Type de demande	Curatif - Dépannage (avec devis)

Enregistrer Annuler

Ajoutez maintenant une description de votre demande dans le champ « **Description** », choisissez la priorité de votre demande via la liste « **Priorité** », puis le type de demande via la liste « Type de demande ». Vous pouvez enfin cliquer sur « **Enregistrer** ».

A cette étape, si vous possédez un logiciel de messagerie, un e-mail récapitulatif est automatiquement créé. Il peut être utile si vous souhaitez transmettre à vos collaborateurs le détail de cette demande. Nul besoin de l'expédier à Biomesnil Médical : nous sommes automatiquement avertis en temps réel de la rédaction de votre demande. Vous serez tenu au courant de l'évolution de votre demande par nos services.

Votre GMAO en ligne affichera enfin un écran récapitulatif de votre demande.

Optim CEM 5.0.2

Demandaes d'intervention - Liste

Nombre d'enregistrements : 0

OptimCEM  
Clinical Equipment Management

Déconnexion

Retour à la liste Ajouter Modifier Supprimer

Code	393
Date d'entrée (jj/mm/aaaa hh:mm)	14/5/2009 16:48
Date de la demande (jj/mm/aaaa hh:mm)	14/5/2009 16:48
Demandée par	
Demandée par (texte libre)	Laurent DUPONT
Service	ADMINISTRATION
Statut Demande	Non consultée
N° Equipement	00019680
N° Série	F-1163
Nomenclature	36301 - BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE
Modèle	ICC 300
Marque	ERBE MEDICAL
Lieu	NIVEAU 0
Description	Problème de coagulation, défaut électrode active.
Priorité	Haute
Type de demande	Curatif - Dépannage (avec devis)

Premier Précédent Suivant

A partir de ce moment, vous pouvez continuer à utiliser la GMAO normalement, ou même fermer votre navigateur Internet : votre demande sera traitée dans les meilleurs délais.